

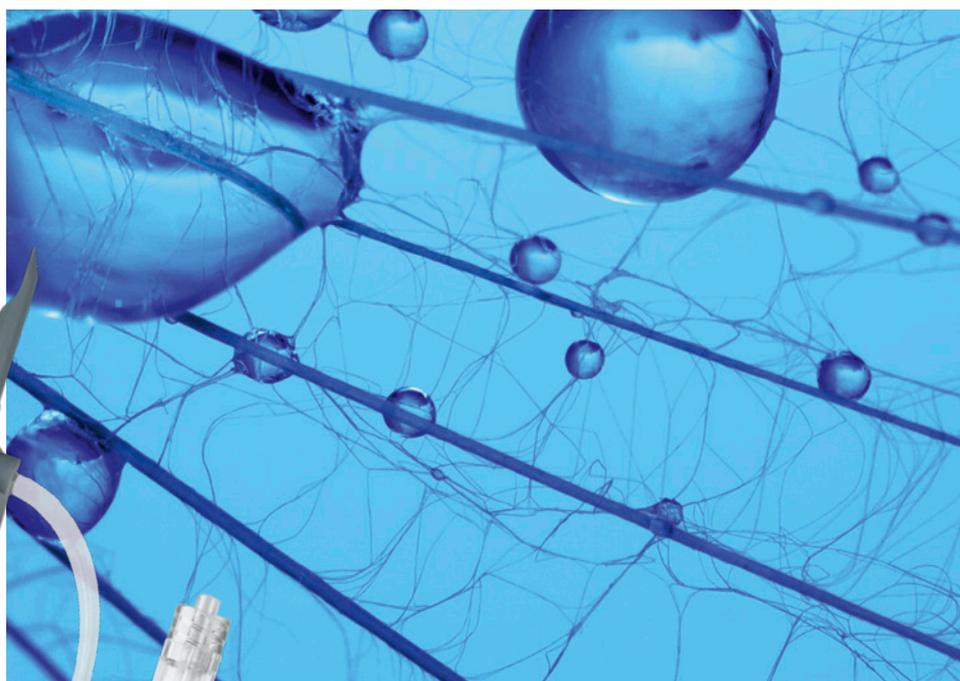


CODAN Mix-Ad Set

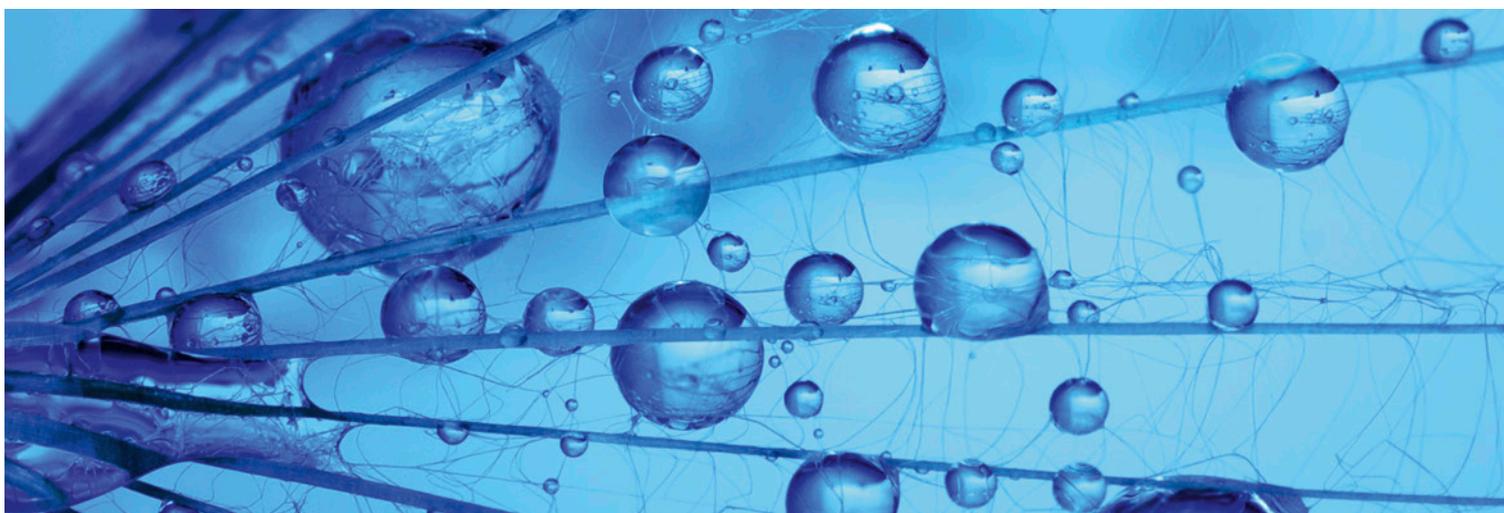

Gestione sicura degli antibiotici

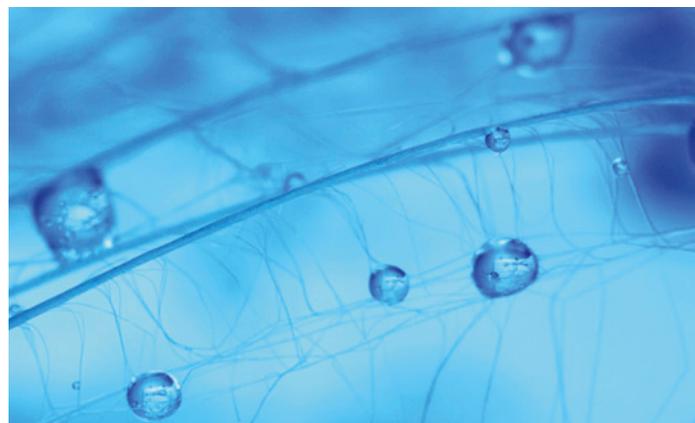

CODAN Mix-Ad Set

Preparazione e somministrazione - tutto in un unico sistema

Il trattamento con antibiotici per via endovenosa è una delle terapie farmacologiche più comuni in ambito ospedaliero, e ciò comporta il rischio di esposizione agli antibiotici da parte di numerosi infermieri e personale sanitario.

Gli antibiotici vengono classificati come farmaci pericolosi, pertanto il personale sanitario dovrebbe tutelarsi dalla relativa esposizione. Durante la preparazione degli antibiotici, eventuali fuoriuscite e contaminazioni ambientali sono piuttosto comuni e dovrebbero essere evitate.

Il CODAN Mix-Ad Set è un sistema utilizzato per sciogliere i farmaci liofilizzati e somministrare al paziente la risultante infusione in un unico sistema completo. Si tratta di un prodotto sviluppato appositamente per l'uso con farmaci che richiedono una manipolazione sicura senza alcun rischio di contaminazione durante la preparazione e la somministrazione.

I CODAN Mix-Ad Set sono stati realizzati in stretta collaborazione con gli operatori sanitari; le caratteristiche di sicurezza e i vantaggi per l'utilizzatore sono stati ampiamente comprovati nel corso di anni di utilizzo.

Sviluppo

I continui sviluppi e miglioramenti garantiscono che i nostri set di infusione per la manipolazione sicura dei farmaci soddisfino i requisiti nazionali ed internazionali e che possano essere utilizzati in modo vantaggioso in combinazione con altri prodotti CODAN.

Resistenza agli antibiotici

Le infezioni batteriche sono state trattate in modo efficace con gli antibiotici a partire dagli anni '40. Tuttavia, l'utilizzo sempre più crescente e prolungato di tali farmaci ha causato un adattamento da parte dei batteri al trattamento antibiotico, rendendo gli antibiotici meno efficaci. La resistenza agli antibiotici è una grave minaccia per la salute pubblica, dato che non esistono reali alternative. La causa principale della resistenza è l'utilizzo improprio e la prescrizione non necessaria di antibiotici. Nel mondo si stanno attuando diverse strategie per ridurre la resistenza agli antibiotici, ad es. L'utilizzo ponderato e le precauzioni igieniche per la gestione della contaminazione. Evitare l'esposizione agli antibiotici è una parte minima ma importante nella lotta contro i microrganismi resistenti. Con prodotti CODAN che garantiscono una preparazione e somministrazione in sicurezza di tali farmaci, il rischio di contaminazione ambientale viene ridotto.



L'utilizzo dei CODAN Mix-Ad Set garantisce la massima sicurezza durante la preparazione e la somministrazione dei farmaci.

Vantaggi del lavoro utilizzando il CODAN Mix-Ad Set

- Riduzione dell'esposizione a farmaci pericolosi
- Riduzione del rischio di allergie da contatto
- Procedure di lavoro semplificate / Meno rifiuti grazie alla riduzione di confezioni
- Riduzione degli sprechi: tutta la dose di antibiotico viene somministrata al paziente

I CODAN Mix-Ad Set sono già noti per la loro eccezionale qualità e performance; ora vi offriamo gli stessi vantaggi in una versione più ecologica.

CODAN green line® Mix-Ad Set è una linea di prodotti innovativa che offre un'alternativa ai tradizionali prodotti in PVC. Questi Mix-Ad Set sono privi di PVC, il che non solo protegge meglio la salute, ma contribuisce anche positivamente a ridurre l'impatto ambientale.

I green line® Mix-Ad Set sono prodotti di alta qualità che riducono l'impronta ambientale. CODAN è orgogliosa di offrire una soluzione sostenibile che soddisfa le esigenze degli utilizzatori e allo stesso tempo protegge l'ambiente. Scoprite oggi la varietà dei nostri green line® Mix-Ad Set e date un esempio per un futuro consapevole dell'ambiente.


Componenti unici di CODAN

1. Il perforatore progettato da CODAN consente di penetrare con facilità in tutti i flaconi e le sacche per infusione comunemente utilizzati, garantendo una tenuta perfetta e sicura.

2. Il filtro idrofobico integrato nello perforatore garantisce una ventilazione sterile e previene gli aerosol.

3. La velocità di gocciolamento standard è di 20 gocce/1 ml. Il materiale flessibile, trasparente e non riflettente, con indicatore di livello, consente un facile riempimento ed un facile controllo della velocità di gocciolamento. Disponibile con filtro da 15 µm o con uno speciale filtro CODAN Guard® AirStop per evitare l'infusione di aria.

4. Raccordo a Y senza ago (Y SWAN-LOCK®) con meccanismo di apertura/chiusura ad attivazione Luer-Lock. La superficie della valvola chiusa è piatta e può essere facilmente tamponata per la disinfezione - versione senza cappuccio.

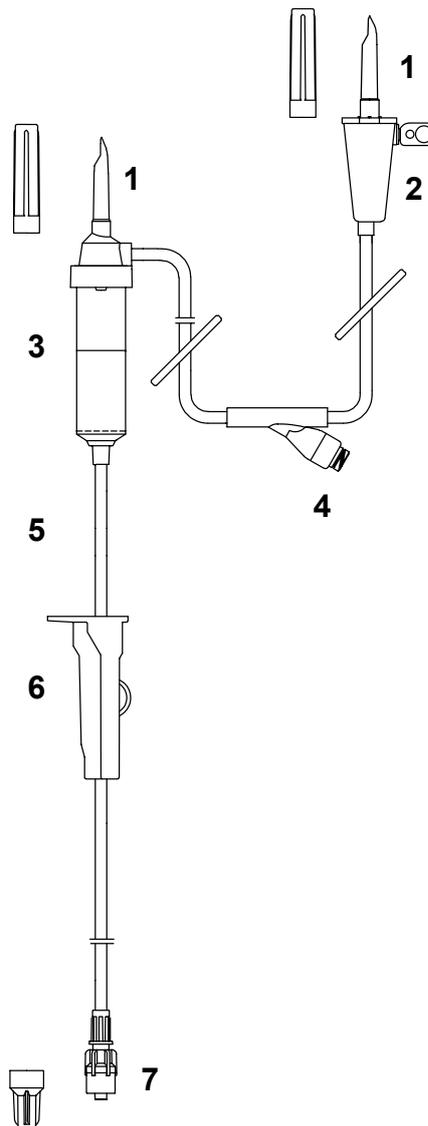

5. I CODAN Mix-Ad Set sono disponibili con tubi in PVC (TOTM) o con tubi green line® (senza PVC). Da diversi anni la nostra produzione ha eliminato l'uso di plastificanti, DEHP e lattice.


6. La nostra roller clamp di precisione CODAN garantisce un flusso costante per tutto il periodo di somministrazione.

7. L'adattatore Luer-Lock maschio con il sistema SELF-LOCK fornisce un collegamento sicuro e confortevole. Il tappo di protezione FlowStop sull'adattatore Luer-Lock maschio è dotato di una membrana idrofobica integrata che garantisce la sterilità interna prima dell'uso. Durante il riempimento del set, il tappo di protezione FlowStop resta sull'adattatore Luer-Lock maschio e consente il passaggio dell'aria, ma non appena la soluzione raggiunge la membrana, il flusso si arresta automaticamente.

Il CODAN Mix-Ad Set è disponibile in diverse varianti.



CODAN Guard® Mix-Ad Set/1
(1 perforatore)

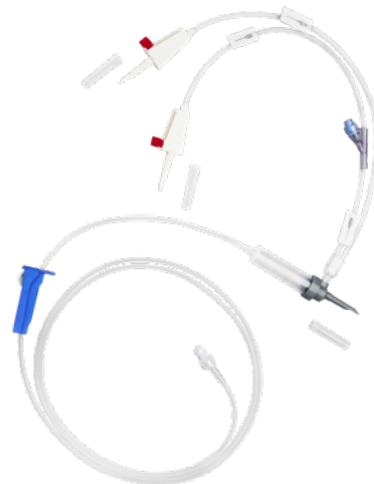

CODAN Guard® Mix-Ad Set/2
(2 perforatori)



Mix-Ad Set Inline/1

CODAN nel mondo

CODAN è conosciuta a livello internazionale come fabbricante e fornitore di sistemi per la somministrazione di farmaci. Il gruppo CODAN impiega in tutto il mondo più di 1500 persone.

Il marchio CODAN è sinonimo di affidabilità, qualità e precisione, costruite sull'esperienza e il know-how acquisite in più di 60 anni di ricerca e sviluppo. Gli stabilimenti manifatturieri di proprietà e le unità commerciali dislocate nel mondo sono una garanzia di efficienza produttiva, di una rete di vendita consolidata e un servizio di prima qualità per i nostri clienti nel settore della tutela della salute.

CODAN Le linee dei prodotti

- Set di infusione
- Set di trasfusione
- Prolunghe e connettori multipli
- Accessori per infusione e trasfusione
- Filtri per infusione e sistemi filtranti
- Prodotti per uso neonatale e pediatrico
- Set di prelievo, preparazione e somministrazione
- CODAN CYTO®
- Prodotti Chemoprotect®
- Siringhe monouso
- Sistemi invasivi di monitoraggio della pressione sanguigna
- Pompe da infusione
- Altri prodotti CODAN

La conformità dei sistemi di gestione della qualità definiti con le disposizioni della norma EN ISO 13485, della Direttiva CEE 93/42 e/o del Regolamento (UE) 2017/745 è stata certificata dagli organismi notificati pertinenti e competenti:

TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH
23738 Lensahn, Germany
CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany
CODAN US Corporation · Santa Ana, CA 92704, USA
CODAN ARGUS AG · 6340 Baar, Switzerland

Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS · 4970 Rødby, Denmark

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN 11, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · California · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika

Manufacturer

CODAN Medizinische Geräte GmbH
Stig Husted-Andersen Straße 11 · 23738 Lensahn, Germany
Tel. +49 (0) 43 63 · 51 11 · Fax +49 (0) 43 63 · 51 12 14
codan@codan.de · www.codancompanies.com



The decisive connection